



swident

WE SUPPORT YOUR PROFESSION

PARTNER



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

El movimiento del respaldo abatible está sincronizado con el reposapiernas, lo que permite un apoyo estable para los pacientes y reduce su necesidad de encontrar una nueva posición cómoda.



Partner evita la tensión en la columna del paciente y ofrece un soporte lumbar superior.

DISEÑO: TECNOLOGÍA Y ESTILO

El diseño, la ergonomía y la comodidad del sillón Partner representan una combinación ideal para potenciar el trabajo del profesional. El sillón tiene una forma que permite que los dentistas se muevan con facilidad y garantiza la comodidad del paciente.

El movimiento del reposapiernas/respaldo abatible para alcanzar la posición de Trendelenburg garantiza la comodidad del paciente, mientras que el respaldo delgado y bien formado proporciona un excelente espacio para las piernas y una postura de trabajo ergonómica. El tapizado es de poliuretano flexible y skai bielástico, es sin costuras y fácil de esterilizar.

UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD

Partner ha sido diseñado para mejorar la interacción entre el equipo dental. Alivia el estrés de los dentistas, pacientes y asistentes, al tiempo que ofrece un rendimiento superior, comodidad y seguridad.

Este resultado se ha alcanzado gracias a soluciones exclusivas y a una cuidadosa elección de los materiales, con el fin de combinar estilo, eficiencia y calidad.



Los dentistas pueden trabajar fácilmente cuando los pacientes se sienten cómodos y relajados.

UN IDEAL PARTNER

Gracias a su diseño, tecnología, flexibilidad y seguridad higiénica, Partner es fiable, eficiente y capaz de ayudar al personal dental en la práctica diaria.



REPOSABRAZOS DERECHO MOVIL
(OPCIONAL)



La unidad dental está controlada por microprocesadores.

BLANCO



PLATA



CROMADO



Tres estilos de aluminio
reposabrazos disponibles.

El reposacabezas ajustable de doble articulación permite un posicionamiento de la cabeza cómodo y sin esfuerzo: sin compresión del diafragma ni flujo sanguíneo excesivo a la cabeza.



REPOSACABEZAS DOBLE ARTICULADO AJUSTABLE



Junto con el reposacabezas ajustable de doble articulación, la forma del respaldo garantiza una posición cómoda y correcta también para pacientes pequeños y niños.

TECNOLOGÍA FÁCIL DE USAR PARA UNA EFICACIA INMEDIATA

Swident ha adoptado y personalizado la mejor tecnología disponible para ofrecer una eficacia inmediata e intuitiva. Las mangueras de instrumentos largas y los brazos perfectamente equilibrados garantizan la mejor postura de trabajo. El brazo de Swident proporciona un equilibrio supremo, garantiza movimientos suaves y sin esfuerzo y tiene una excelente movilidad hacia delante y hacia los lados. Las mangueras tienen un largo alcance y los instrumentos tienen un diseño agradable, tranquilizador y extremadamente relajante. El panel de control bajo membrana sellada para la activación y programación de todas las funciones principales para que el estado de trabajo tanto de la unidad dental como de los instrumentos esté siempre bajo control.

El equipo establecido y las opciones adicionales se pueden personalizar para satisfacer todas las necesidades.





LA MESA DE INSTRUMENTOS DEL DENTISTA

- Información simple pero exhaustiva
- Fácil programación de las funciones de los instrumentos, las funciones de la unidad dental y el sillón del paciente.
- Control y visualización del sistema de desinfección.
- Control y visualización de la regulación de velocidad del micromotor.
- Control y visualización de la intensidad de vibración del detartrador ultrasónico.
- Control y visualización de luces de instrumentos.
- Control y visualización del funcionamiento inverso del micromotor.
- Programas de movimiento del sillón de paciente para doble función (programas para 4 posiciones).
- Llenador de vasos y control de descarga del tazón.
- Encendido/apagado de la tecla de la luz de funcionamiento.
- Configuración hasta 5 instrumentos



HIGIENE

La protección en silicona del soporte del instrumento y el mango de operación son removibles y esterilizables en autoclave. El mando electrónico bajo membrana sellada del panel de control es fácil de limpiar.



EL PEDAL

Con un solo pedal, puede controlar los instrumentos, el sillón, la lámpara y otras funciones auxiliares. De esta forma, las manos quedan libres para trabajar con la mayor precisión y concentración, evitando el uso de mandos manuales y eliminando los riesgos de infección cruzada.

INTERACCIÓN DE FLUIDOS

Sostenida por un brazo articulado doble que garantiza todas las posiciones de trabajo, la mesa de instrumentos del asistente es simple y sólida para facilitar el procedimiento de esterilización. Puede girar 200°, ofreciendo así un fácil acceso a los comandos de control y a los instrumentos. El panel de control bajo membrana sellada permite gestionar inmediatamente la función del hidrograma del sillón.





MESA AUXILIAR DE INSTRUMENTOS

La mesa auxiliar de instrumentos montada sobre doble brazo articulado, equipada con un panel de control bajo membrana sellada para la activación de los movimientos del sillón paciente, de 4 posiciones de programas, de llenado de vasos y lavado de tazas. Está predispuesto con 2 soportes para expulsor quirúrgico y de saliva, y un soporte para instrumento adicional (ya sea una segunda jeringa o una lámpara de curado), para la máxima interacción del equipo dental. El panel de control es fácil de limpiar y el mango de operación es removible y esterilizable en autoclave.



HIGIENE

Partner cuenta con un completo sistema de higiene interna y externa para garantizar la seguridad de pacientes y usuarios. El transportador de los tubos de succión es de fácil acceso. Los filtros anchos garantizan la máxima eficacia y reducen la necesidad de vaciar el filtro con frecuencia.



FÁCIL DE USAR

Los tubos de Partner se pueden desmontar por completo para su esterilización.

MÁS ESPACIO OPERATIVO

Gracias a su compacto sistema hidrogrupo y a la escupidera giratoria de 180°, Partner ofrece más espacio operativo para trabajar. Esto significa que hay más soluciones de trabajo disponibles.

La superficie de Partner está fabricada en tecnopolímeros y es altamente resistente a los desinfectantes químicos.





HIGIENE

La taza de la escupidera y el soporte de la taza son un bloque entero de cerámica, que se puede quitar fácilmente. La taza de la escupidera y el relleno de la taza se pueden quitar rápidamente y son esterilizables en autoclave.



ESPACIO E HIGIENE

La taza de la escupidera de cerámica no tiene intersticios: esto evita que las bacterias y los fluidos contaminen la unidad. La rotación de 180° garantiza más espacio y aumenta la comodidad de los pacientes.



SAFESPRAY (opcional)


Safespray es un recipiente presurizado para ser llenado con agua destilada (eventualmente líquidos desinfectantes adicionales) y se utiliza para todos los sprays de instrumentos de la mesa de instrumentos del dentista y la jeringa del asistente.

Safespray elimina con éxito la contaminación cruzada y garantiza un área de trabajo segura para pacientes y usuarios.

PERSONALIZA TUS POSICIONES DE TRABAJO

Partner ha sido concebido para permitir a los odontólogos trabajar cómodamente entre 8 y 14 horas en posiciones sin estrés y asegurando el máximo confort a los pacientes.

Con soluciones exclusivas y materiales cuidadosamente seleccionados (altamente resistentes al desgaste), Swident garantiza una gran fiabilidad, Fácil y rápido mantenimiento operativo, seguridad y comodidad. Partner es un producto de larga duración, compatible por la asistencia posventa calificada y eficiente de Swident Point.

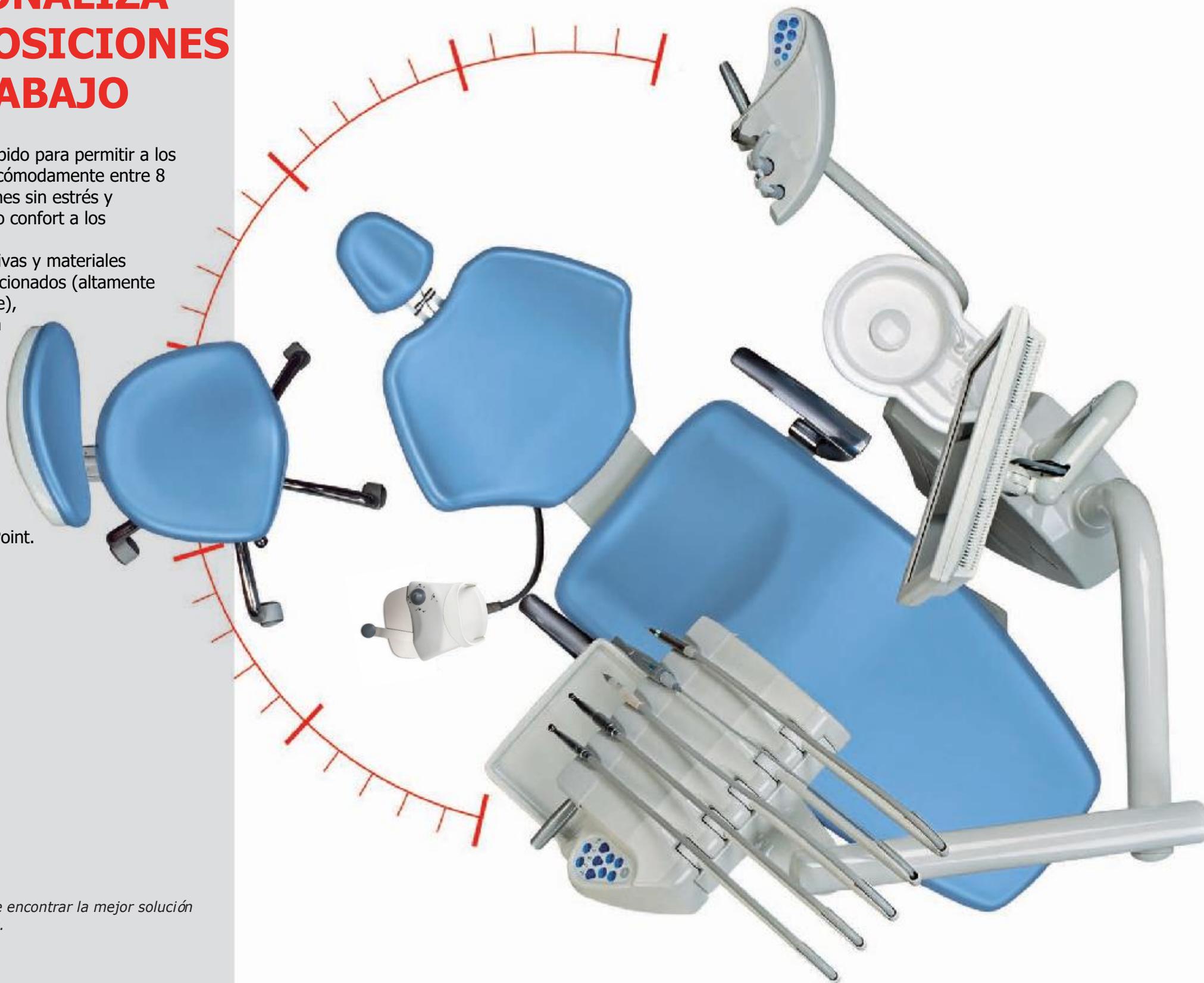

Partner la certeza de encontrar la mejor solución para cada necesidad.

EFICACIA INMEDIATA



LÁMPARA LED POLARIS SWIDENT

- Brazo Nuevo Flow Motion
- Cabeza, articulaciones y brazos de aluminio
- Rotación en tres ejes
- Dimensiones spot luminoso: 200x80mm (a 700mm de distancia)
- Intensidad luminosa regulable hasta 50.000 lux
- Manijas desmontables y esterilizables
- Alimentación de 12 a 14 Vca
- Manijas con sistema Plug&Play para el espejo, el filtro y lámpara de blanqueo "Core White"
- 24 meses de garantía



SISTEMA DE AIRE SEGURO (SAS)

Partner está equipado con un sistema de aire seguro. SAS evita la aspiración de aerosoles contaminados y elimina los líquidos y sólidos restantes de las piezas de mano después de trabajar con el último paciente. Además, el flujo de aire procedente de los instrumentos rotatorios pasa a través de un filtro HEPA (aire de partículas de alta eficiencia), lo que reduce el peligro de contaminación cruzada.