



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com



G3

NEW

*live a new design
viva un nuevo diseño*

GNATUS
Dental



live a new design
viva un nuevo diseño

Inspired by the concepts of excellence in Gnatus, get ready to see now the result of an great improvement.

Gnatus New G3 is a dental set designed to transform your work routine, bringing values related to biosecurity concepts, new technologies and the versatility that the most demanding professionals was looking for.

An audacious dental set, with modern forms and details that will promote new experiences.

Especially designed for those most confident professionals.

A new design.
The G3 New.

Inspirado en los conceptos de excelencia de Gnatus, ahora usted verá el resultado de un gran perfeccionamiento.

El nuevo consultorio Gnatus G3 New fue proyectado para transformar su rutina de trabajo, valorando los conceptos de tecnología, bioseguridad y la versatilidad que los profesionales más exigentes están buscando.

Un consultorio innovador, con formas más modernas y detalles que le permitirán experimentar nuevas experiencias.

Desarrollado especialmente para quien está preparado para el desafío.

Un nuevo diseño.
Un G3 New.








GNATUS G3 NEW H

DESIGN, COMFORT AND
TECHNOLOGY. TAKE THEM ALL.

ENTRE DISEÑO, CONFORT Y TECNOLOGÍA.
QUEDESE CON TODOS.



AMBIDEXTROUS
AMBIDIESTRO

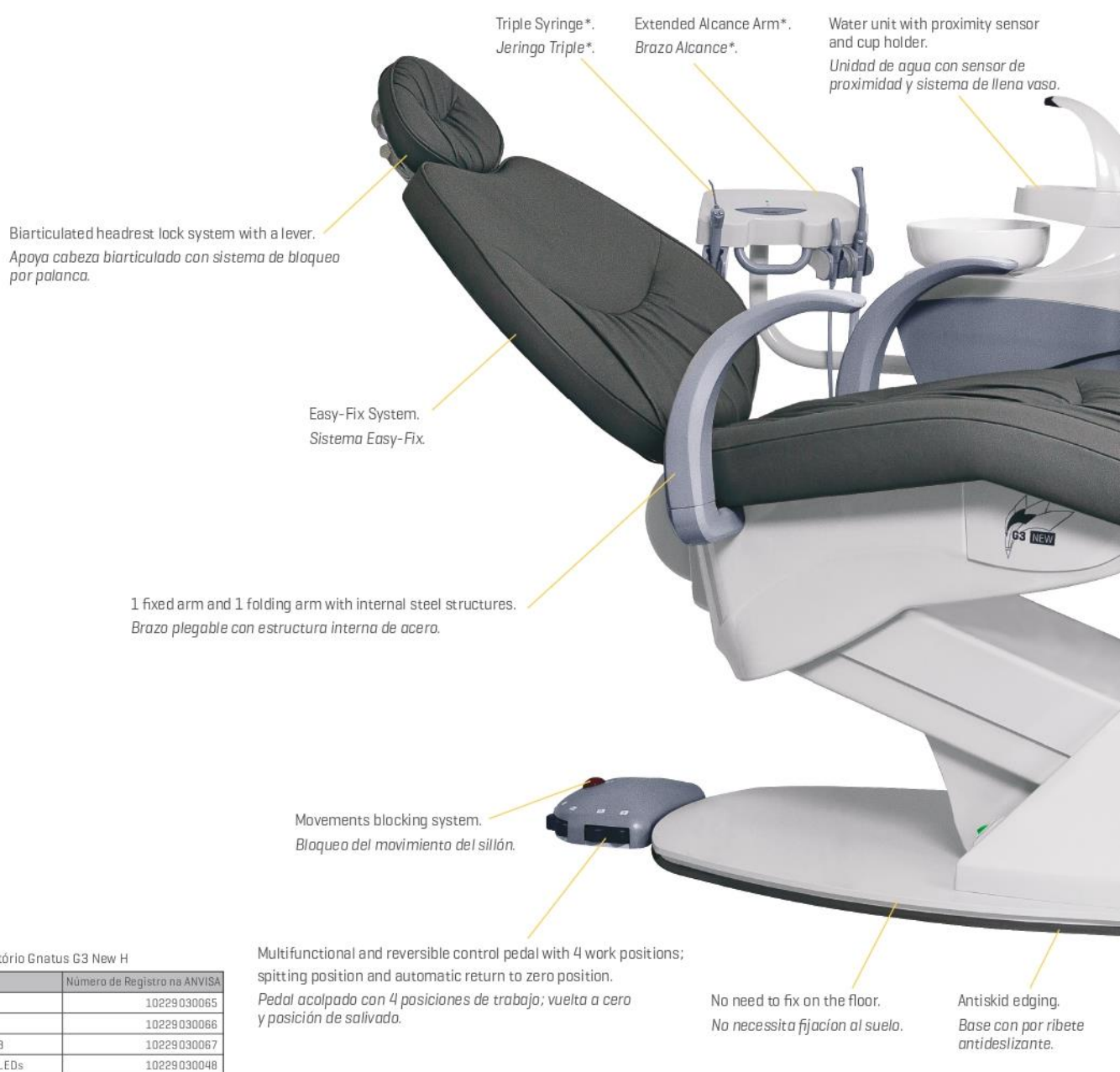

Consultório Gnatus G3 New H

Composto por	Número de Registro na ANVISA
Cadeira Syncrus G3	10229030065
Equipo Syncrus G3 H	10229030066
Unidade de Água Syncrus G3	10229030067
Refletor Sirius G8 Sensor 5 LEDs	10229030048



Sirius Sensor 5 LEDs Dental Lights

Proximity Sensor;

Rectangular light focus;

Removable and autoclavable handles;

Adjustable light intensity (35, 25 and 15 thousand lux).

Reflector Sirius Sensor 5 LEDs

Tecnología de iluminación LED Sensor de proximidad;

Perillas autoclavables y extraíbles;

Protector delantero extraíble;

Foco rectangular;

Con intensidad de la iluminación en 35, 25 y 15 mil lux.

Multimedia Kit*.
Kit Multimedia*.

Delivery unit with pneumatic arm.
Unidad dental con brazo neumático.

Wide upholstery with 22 colors options.
Amplio tapizado con 22 opciones de colores.

PAD control with a LED Negatoscope.
Comando electrónico de los
movimientos. PAD.

Pneumatic lock activation.
Accionamiento del brazo neumático.

Support tray.
Bandeja auxiliar.

Integrated connection box.
Caja de conexión integrada.

Allows up to 5 working terminals (ST + 4 Terminals)**.
Permite hasta 5 terminales de trabajo (ST + 4 terminales)**.

*Optional/Opcionales.

**Hand Pieces not included./No incluido las Piezas de Mano.



GNATUS G3 NEW F

QUALITY AND PRACTICALITY
WORKING TOGETHER.

CALIDAD Y PRATICIDAD
TRABAJANDO JUNTOS.



AMBIDEXTROUS AMBIDIESTRO

Water unit with proximity sensor
and cup holder.

Unidad de agua con sensor de
proximidad y sistema de llenar vaso.

Biarticulated headrest lock system with a lever.

Apoya cabeza biarticulado con sistema de bloqueo
por palanca.

Easy-Fix System.
Sistema Easy-Fix.

1 fixed arm and 1 folding arm with internal steel structures.

Brazo plegable con estructura interna de acero.

Movements blocking system.

Bloqueo del movimiento del sillón.

Multifunctional and reversible control pedal
with 4 work positions; spitting position and
automatic return to zero position.

Pedal acoplado con 4 posiciones de trabajo;
vuelta a cero y posición de salivado.

No need to fix on the floor.
No necessita fijación al suelo.

Antiskid edging.
Base con por ribete
antideslizante.

Consultório Gnatus G3 New F

Composto por	Número de Registro na ANVISA
Cadeira Syncrus G3	10229030065
Equipo Syncrus G3	10229030066
Unidade de Água Syncrus G3	10229030067
Refletor Sirius G8 Sensor 3 LEDs	10229030048

Sirius Sensor 3 LEDs Dental Lights

Proximity Sensor;

Rectangular light focus;

Removable and autoclavable handles;

Adjustable light intensity (30, 20 and 10 thousand lux).

Reflector Sirius Sensor 3 LEDs

Tecnología de iluminación LED;

Sensor de proximidad;

Perillas autoclavables y extraíbles;

Protector delantero extraíble;

Foco rectangular;

Con intensidad de la iluminación en 30, 20 y 10 mil lux.

Sirius Sensor LED Dental Lights* Reflector Sirius Sensor LED*

Available in 3 exclusive versions with 5 LEDs; 3x2 LEDs and 3 LEDs.

3 Diferentes modelos según el número de LEDs (5 LEDs; 3x2 LEDs o 3 LEDs).



Sirius 5 LEDs



Sirius 3x2 LEDs

Persus Dental Light LED* Reflector Persus LED*

LED illumination system.
Sistema de iluminación LED.



Delivery unit with pneumatic arm.
Unidad dental con brazo neumático.

Support tray.
Bandeja auxiliar.

Removable cover made of stainless steel.
Cubierta removible de Acero Inoxidable.

PAD control with a LED Negatoscope.
Comando electrónico de los movimientos. PAD.

Pneumatic lock activation.
Accionamiento del brazo neumático.

Allows up to 5 working terminals (ST + 4 Terminals).
Permite hasta 5 terminales de trabajo (ST + 4 terminales).

Integrated connection box.
Caja de conexión integrada.

Wide upholstery with 22 colors options.
Amplio tapizado con 22 opciones de colores.



*Optional/Opcionales.



GNATUS

G3 NEW FIT F

VERSATILITY IS A MATTER OF STYLE.
VERSATILIDAD ES UNA CUESTIÓN DE ESTILO.



AMBIDEXTROUS AMBIDIESTRO

Water unit with proximity sensor
and cup holder.

Unidad de agua con sensor de
proximidad y sistema de llenado de vaso.

Biarticulated headrest lock system with a lever.
Apoya cabeza biarticulado con sistema de bloqueo
por palanca.

Easy-Fix System.
Sistema Easy-Fix.

1 fixed arm and 1 folding arm with internal steel structures.
Braço plegable con estrutura interna de acero.

Movements blocking system.
Bloqueo del movimiento del sillón.

Multifunctional and reversible control pedal with 4 work positions;
splitting position and automatic return to zero position.
Pedal acolchado con 4 posiciones de trabajo; vuelta a cero
y posición de salvado.

No need to fix on the floor.
No necessita fijación al suelo.

Antiskid edging.
Base con por ribete
antideslizante.

Integrated connection box.
Caja de conexión integrada.

Consultório Gnatius G3 New Fit F

Composto por	Nº de Reg. na ANVISA
Cadeira Syncrus G3	10229030065
Equipo Syncrus G3	10229030066
Unidade de Água Syncrus G3	10229030067
Refletor Persus LED	10229030063

Persus Dental light LED*

Double side ergonomically shaped handle that facilitates asepsis and the application of barriers.

Detachable faceplate.

Activation and regulation of the intensity of the chair in the control pedal.

Intensity from 8,000 to 35,000 Lux (with variation of + - 20%).

Reflector Persus LED*

Doble empuñadura lateral con mango ergonómico que facilita la asepsia y la aplicación de barreras.

Placa frontal desmontable.

Activación y regulación de la intensidad en el pedal de control de la silla.

Intensidad de 8.000 a 35.000 Lux (con una variación de + - 20%).



Wide upholstery with 22 colors options.
Amplio tapizado con 22 opciones de colores.

Optional / Opcionales*

Sirius Sensor LED Dental Lights* Reflector Sirius Sensor LED*

Available in 3 exclusive versions with 5 LEDs; 3x2 LEDs and 3 LEDs.

3 Diferentes modelos según el número de LEDs (5 LEDs; 3x2 LEDs o 3 LEDs).

PAD*

PAD control with a LED Negatoscope.

Comando electrónico de los movimientos. PAD.



Biosystem kit / Kit biosystem*


Internal disinfection system of the hoses through bactericidal liquid, preventing risk of cross contamination.

Sistema de desinfección interna de las mangueras a través de líquido bactericida, evitando el riesgo de contaminación cruzada.



Water unit / Unidad de agua

Technology and design in every detail.
Tecnología y diseño en cada detalle.

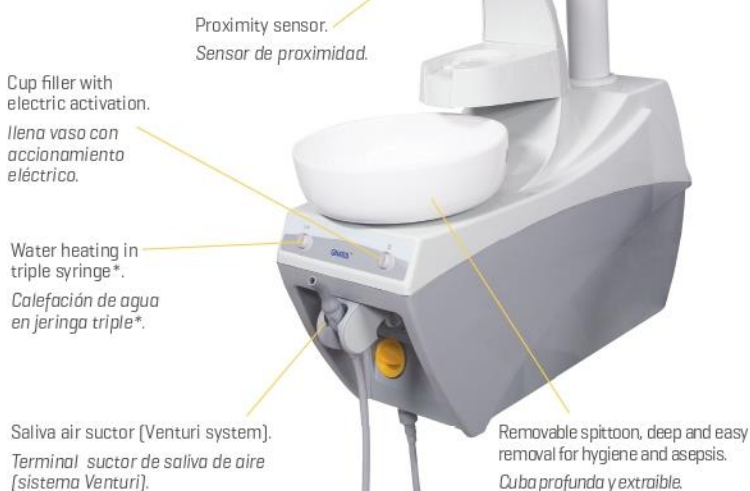

Also available in version:
También disponible en versión:

Dental Set/Consultorio
Gnatus G3 New FIT H.



Consultório Gnatus G3 New Fit H

Composto por	Nº de Reg. na ANVISA
Cadeira Syncrus G3	10229030065
Equipo Syncrus G3 H	10229030066
Unidade de Água Syncrus G3	10229030067
Refletor Persus LED	10229030063

Also available in version:
También disponible en versión:

Dental Set/Consultorio
Gnatus G3 New FIT C.



Consultório Gnatus G3 New Fit C

Composto por	Nº de Reg. na ANVISA
Cadeira Syncrus G3	10229030065
Equipo Syncrus G3	10229030066
Unidade de Água Syncrus G3	10229030067
Refletor Persus LED	10229030063

* Optional/Opcionales.




DENTAL CHAIR / SILLÓN

TAKE CONTROL OF YOUR PRODUCTIVITY.

USTED EN EL CONTROL DE SU PRODUCTIVIDAD.

- Integrated connection box;
- 1 fixed arm and 1 folding arm with internal steel structures;
- Base constructed in steel fully protected by antiskid edging, providing perfect stability;
- Ample upholstery with lumbar support.
- Amplio tapizado con apoyo lumbar;
- 1 brazo fijo y un brazo plegable con las estructuras internas de acero;
- Base construida en acero plenamente protegida por ribete antideslizante, que proporciona una perfecta estabilidad;
- Caja de conexión integrada.



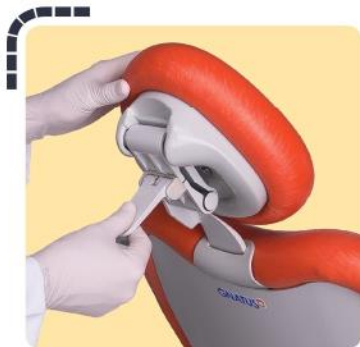

Biarticulated headrest / Apoyo de cabeza biarticulado

Biarticulated headrest, removable and anatomical to provide perfect accommodation of the patient. The anteroposterior movement, with height adjustment, allows direct visualization of all quadrants of the mouth. It facilitates care in pediatric dentistry, and handicapped patients.

Apoyo de cabeza biarticulado, anatómico y desmontable, para proporcionar un alojamiento perfecto del paciente. El movimiento anteroposterior, con ajuste de altura, permite la visualización directa de todos los cuadrantes de la boca. Facilita la atención en odontología pediátrica y pacientes discapacitados.



Easy Fix System Sistema Easy-Fix

Rapid removal of upholstery.
Eliminación rápida de la tapicería del respaldo.



Crystal plastic Plástico cristal


To protect the seat in the foot area.
Para proteger el asiento en los pies.



Retractable arm Brazo plegable

Folding arm with side opening for easy access to the patient and increases the professional productivity.

Brazo plegable con abertura lateral para un fácil acceso al paciente y aumento de la productividad del profesional.

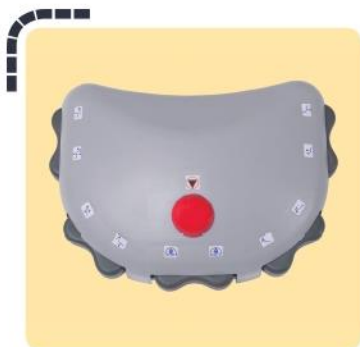

Integrated Control Pedal / Pedal de comando

- Four work programs and memory with the status of the dental light;
- Spitting position and return to the last position;
- Activation and adjustment of intensity of the dental light;
- Automatic Return to zero position;
- Rise and lowering of the seat and backrest;
- Movements blocking of dental chair with emergency light indication;
- The command pedal can be easily reversed.

- 4 programas de trabajo con memorización de la condición del reflector;
- Posición de escupir y retorno a la última posición;
- Accionamiento del reflector;
- Regresa automático a la posición cero;
- Ascenso y descenso del asiento y del respaldo;
- Bloqueo del movimiento del sillón, con indicación de luz de emergencia;
- El pedal de comando puede ser fácilmente revertido.



Wide and anatomical upholstery Amplio y anatómico tapizado

Mounted on rigid structure covered with injected polyurethane of high resistance.
Tapicería amplia, montada sobre una estructura rígida recubierto con poliuretano inyectado de alta resistencia.



On/off button Botón - Activar / Cerrar

Laterally located to the dental set bringing more comfort to the professional.
Situado en el lateral de la base del sillón, trayendo más comodidad para el profesional.



Movements blocking system Bloqueo del movimiento del sillón

A chair lock system which provides complete safety during the procedures.

Sistema específico de bloqueo de las funciones y movimientos del sillón, lo que proporciona una total seguridad durante los procedimientos.



WATER UNIT / UNIDAD DE AGUA

TECHNOLOGY AND DESIGN IN EVERY DETAIL.

TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN CADA DETALLE.

In a new design, the G3 New water unit brings up a proximity sensor, cup filler and filters attached to it, optimizing the operation with ergonomomy and biosafety.

Con nuevo diseño, la unidad de agua G3 New, cuenta con un sistema unico de sensor de proximidad, llena vaso y filtro de residuos acoplado a ella, optimizando el trabajo, la ergonomía y biosseguridad.



Extended Alcance Arm* / Brazo Alcance*

Wide mobility allowing closer approximation to the operative area.
Fácil acceso al campo quirúrgico. Permite movilidad más cerca del campo operatorio.



Water flow adjustment in the spittoon and in the cup filler.
Ajuste del flujo de agua en la escupidera y en el llena vaso.

Dual system for water supply (Network / Reservoir)*.
Sistema de abastecimiento de agua dual (Red / Depósito)*.

Master valve (key to cutting water and air)*.
Válvula master (clave para reducir el agua y el aire)*.



Proximity Sensor / Sensor de Proximidad

G3 New, features an exclusive proximity sensor that automatically activates the water flow into the spittoon, providing greater practicability, patient comfort, security and economy of water.

G3 New cuenta con un sensor de proximidad único que activa automáticamente el flujo de agua en la escupidera, proporcionando una mayor comodidad, confort a los pacientes y el ahorro de agua.



Removable spittoon Cuba extraíble

Deep and easy removal for hygiene and asepsis.

Profunda y puede quitar fácilmente para la higiene y asepsia.



Heating water system Calefacción de agua

Water heating for triple syringe that minimizes sensitivity during procedures*.

Botón del Calefacción en el agua de la jeringa.*



Debris filter Filtro de residuos

Easy access, removal and cleaning.

Fácil acceso, extracción y limpieza.



Water unit retractable at 60° Unidad de agua plegable 60°

Wide mobility that allows easy access to the operative area.

Con el cuerpo superior diseñado para ofrecer una mejor posición de escupir, sirviendo a la mayoría de los biotipos de pacientes.

*Optional/Opcionales.



DELIVERY UNIT H / VERSIÓN MÓDULO H

FOR YOUR SAFETY, AN EXCLUSIVE RODS LOCKING SYSTEM.

PARA SU SEGURIDA Y COMODIDAD UN SISTEMA UNICO DE TRABA DE LAS BARRAS.

- LED Negatoscope;
 - PAD control with all commands of the chair, delivery unit functions, water unit and reflector;
 - Triple syringe;
 - 2 terminals for high speed with spray;
 - 1 terminal micromotor without spray.
-
- Negatoscopio LED;
 - Unidad dental con brazo neumática;
 - Panel de comando PAD con movimientos electrónicos;
 - Triple jeringa;
 - 2 terminales para la alta rotación con spray;
 - 1 terminal para baja rotación sin aerosol spray.



Rods locking system Sistema de bloqueo de varillas**

Relieving tension on the hoses with greater mobility for the hand pieces.

Alivia en la tensión de las mangueras con mayor movilidad en las piezas de mano.



DELIVERY UNIT F MÓDULO VERSIÓN F

YOUR DENTAL SET WITH A AMPLE DELIVERY UNIT SPACE.

SU MODULO CON AMPLIA BANDEJA.

AN IDEAL DELIVERY UNIT FOR EACH SET.

PARA CADA CONSULTORIO GNATUS TIENE UN MODULO IDEAL.

- Bilateral handling;
- Manometer as a serie item;
- Set Rotation for electric micro motor (MME) (optional);
- Ultrasound (optional);
- Arm in ABS injected;
- Cover removable in stainless steel - makes cleaning easier and provides more protection;
- Allows up to 5 working terminals (ST + 4 Terminals);
- Pneumatic Arm.

- Unidad dental con manejo bilateral;
- Manómetro como artículo de serie;
- Ajuste de rotación para micro motor eléctrico (MME) (opcional);
- Ultrasonido (opcional); Brazo en ABS inyectado;
- Tapa en acero inoxidable extraíble facilita la limpieza y proporciona más protección;
- Permite hasta 5 terminales de trabajo (ST + 4 terminales);





LED Negatoscope Negatoscopio LED

Wide illumination panel for better visualization of periapical and occlusal radiographs. White and uniform LED lighting.

Amplio campo de la iluminación para una mejor visualización de periapicales y oclusales. Iluminación LED uniforme y blanco.



Pneumatic lock activation Accionamiento de la traba neumática

Located under the handle of the delivery unit.
Localizado debajo del estirador del módulo.



Hand pieces support Apoyo de piezas de mano

Removable and autoclavable.
Removable y autoclavable.



***Delivery unit with ample space available Módulo con un amplio espacio disponible

Allows the accommodation of all working material within reach of the professional.

Permite acomodar todo el material de trabajo para llegar a las manos del profesional.



*Ultrasound adjustment.
Ajuste del ultrasonido.

*MME speed adjustment.
Ajuste de rotación MME.

*Manometer.
Manómetro.



PAD control with the following activations: Panel de comando PAD con los siguientes accionamientos:

1. Up and down of the dental chair seat and backrest.
2. Emergency stop of the dental chair with light indicator.
3. Negatoscope LED activation
4. Biosystem activation.
5. Programmable spittoon and cup holder water.
6. Spitting position and return to the last position.
7. Return to zero position.
8. Job programming (P1; P2; P3 and P4).
9. Turning on the dental light.
10. MME inversion [optional].

1. Ascenso y descenso del asiento y del respaldo.
2. Bloqueo del movimientos del sillón, con indicación de luz de emergencia.
3. Activación del Negatoscopio LED.
4. Activación del Sistema Bio system.
5. Programación del flujo en la escupidera y portavasos.
6. Posición de salivar y retorno a la última posición.
7. Regreso a la posición cero.
8. Programación de trabajos (P1, P2, P3 y P4).
9. Accionamiento del reflector
10. MME inversión [opcional].



SIRIUS SENSOR LED DENTAL LIGHT REFLECTOR SIRIUS SENSOR LED

TECHNOLOGY AS A SERIAL ITEM.
LA TECNOLOGÍA COMO UNO ITEM DE SERIE.



Innovative design with a more robust body easy to clean.

LED LIGHTING TECHNOLOGY

Provides greater durability of the light source - above 50,000 h - about 1,000 times higher than the conventional halogen lamps.

DIFFERENT MODELS

5 LEDs - with lighting intensity in 35, 25 and 15 thousand Lux.

3 LEDs - with lighting intensity in 30, 20 and 10 thousand Lux.

3x2 LEDs - with lighting intensity in 35, 25 and 15 thousand Lux and orange LED 5 thousand Lux.

Diseño innovador con cuerpo más robusto y fácil de limpiar.

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN LED

Proporciona una mayor durabilidad de la fuente de luz - por encima de 50.000 h - alrededor de 1.000 veces mayor que las lámparas halógenas convencionales.

DIFERENTES VERSIONES

5 LEDs - con intensidad de la iluminación en 35, 25 y 15 mil Lux.

3 LEDs - con intensidad de la iluminación en 30, 20 y 10 mil Lux.

3x2 LEDs - con intensidad de la iluminación en 35, 25 y 15 mil Lux y LED naranja 5 mil Lux.





Removable and autoclavable handles **Perillas autoclavables y extraíbles**

Ergonomic design and easy removal.
Diseño ergonómico y fácil extracción.



Handles positioning **Posicionamiento de las perillas**

System that allows multiple.
Sistema que permite el posicionamiento de las perillas en distintas posiciones.



Proximity sensor **Sensor de proximidad**

Activation and adjustment of the light intensity without contact.
Tamaño ideal con amplia iluminación del campo operatorio. Minimiza la necesidad de reposicionamiento constante de foco.



Frontal protector **Protector delantero**


Removable, made of a durable and transparent material easy to clean.
Extraíble, construido en material resistente, transparente y fácil de limpiar.

Rectangular light beam **Foco rectangular**

Ideal size with wide illumination of the operative field. Minimizes the need for constant repositioning of focus.

Tamaño ideal con amplia iluminación del campo operatorio. Minimiza la necesidad de reposicionamiento constante de foco.

Reflector Sirius GB Sensor 3 LEDs - 10229030048
Reflector Sirius GB Sensor 5 LEDs - 10229030048
Reflector Sirius GB Sensor 5 (3x2) LEDs - 10229030048

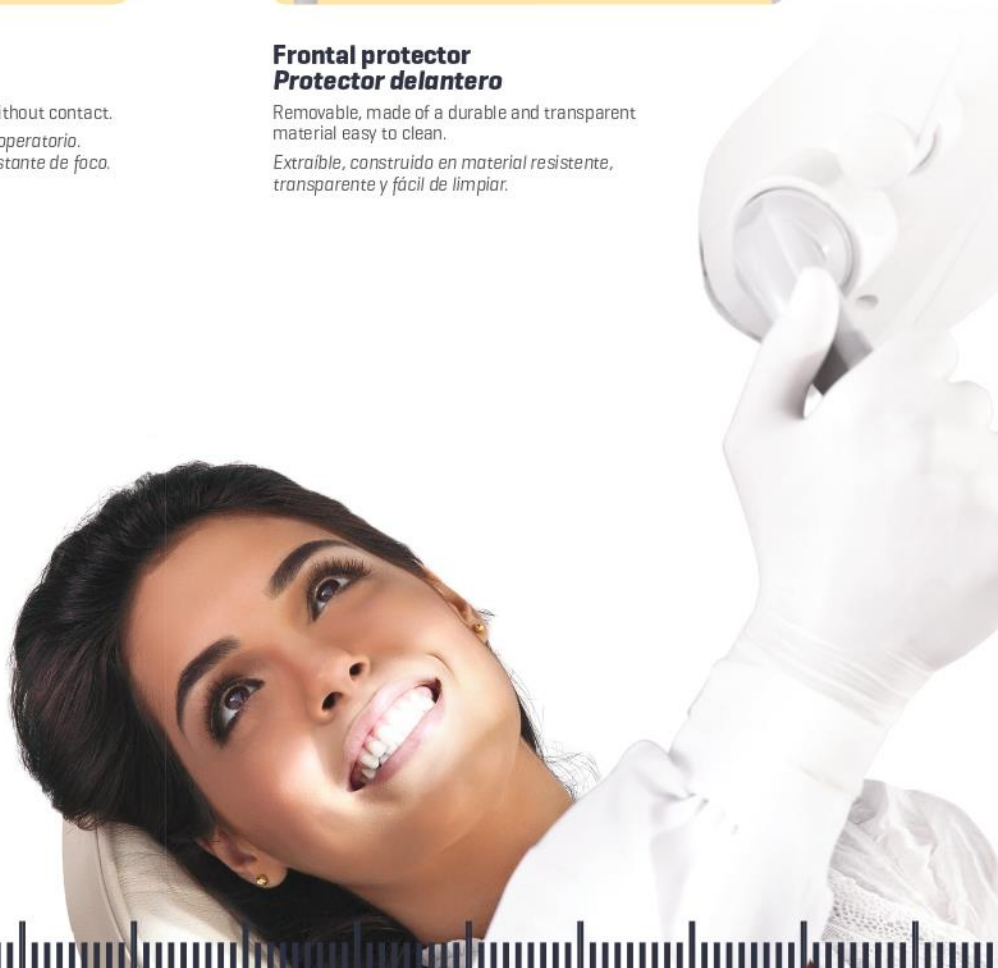

OPTIONAL / OPCIONALES

FOR EACH DETAIL, AN OPTION.
A CADA DETALHE, UN OPCIONAL.



Multimedia Kit/Kit Multimedia

Increases interaction with your patient through intraoral camera and multimedia features.

Amplía la interacción con el paciente a través de la cámara intraoral y funciones multimedia.



Negatoscope Kit/Kit Negatoscopio

Facilitates viewing of radiographic images for a more accurate diagnosis.

Facilita la visualización de imágenes radiográficas para un diagnóstico más preciso.



Peripheral Tray Kit

Kit de bandeja para periféricos

Optimizes space on your dental set.

Optimiza el espacio en su consultorio.



Soft Comfort Headrest Kit Kit Apoyo de cabeza Soft Comfort

Perfect accommodation and comfort to the patient, made of flexible material, soft and washable.

Alojamiento perfecto y comodidad del paciente, hecho de material flexible, suave y lavable.



Ultrasound Kit/Kit Ultrasonido

Versatility in different specialties.

Versatilidad en las diferentes especialidades.



Terminal Kit (High Speed and Micromotor) Kit Terminal (Alta Velocidad y Micromotor)

Terminal with adjustable spray with smooth hose (no grooves).

Terminal con el ajuste de aspersión con manguera lisa (sin ranuras).



Kit Terminal for MME

Kit Terminal para MME

Prepare your unit to have the MME.

Prepare su equipo para recibir el MME.



Curing Light Kit

Kit Fotopolimerizador

Digital display with time control and LED with power at 600 mW/cm².

Pantalla digital con control de tiempo y LED de energía en 600 mW/cm².



Kit Terminal with FO + High Speed COBRA PB LED

Kit Terminal de FO + Alta Rotación COBRA PB LED

Prepare your unit to have the LED illumination system for Cobra Line.

Prepare su equipo para el sistema de iluminación LED para la línea de Piezas de Mano Cobra con el Kit Terminal FO.



Jet Hand Kit/Kit Jet Hand

For prophylaxis and removing extrinsic stains.

Para la profilaxis y la eliminación de manchas extrínsecas.



Triple Syringe Kit/Kit Jeringa Triple

More mobility with a second triple syringe attached to the water unit.

Más movilidad con una segunda jeringa triple de agua adjunto a la unidad de agua.



Suctor Terminal Kit for Vacuum Pump Kit Terminal Suctor para bomba de vacío

Terminal 11mm with flow regulators and flexible hose.

Terminal 11mm con reguladores de flujo y manguera flexible.



Venturi Suctor Terminal Kit
Kit Terminal Suctor Venturi

Terminal sucking the air with flexible hose.
Terminal chupando el aire con manguera flexible.



Extended Arm Kit on water unit
Kit Brazo Alcance en la unidad de agua

Ergonomics with wide movement.
Ergonomía, con amplio movimiento.



Persus Dental Light LED
Reflector Persus LED

LED illumination lighting system and illumination intensity between 8 and 35 thousand lux.
Con sistema de iluminación de LED e intensidad de iluminación entre 8 y 35 mil lux.



Sirius Sensor 5 LEDs Dental light
Reflector Sirius Sensor 5 LEDs

Illumination intensity in 35, 25 and 5 thousand lux.
Con intensidad de iluminación en 35, 25 y 5 mil lux.



Sirius Sensor 3x2 LEDs Dental light
Reflector Sirius Sensor 3x2 LEDs

Illumination intensity in 35, 25 and 15 thousand lux, 5 thousand lux in orange LED.
Con intensidad de iluminación en 35, 25 y 15 mil lux, y 5 mil lux en LED naranja.



Sirius Sensor 3 LEDs Dental light
Reflector Sirius Sensor 3 LEDs

Illumination intensity in 30, 20 and 10 thousand lux.
Con intensidad de iluminación en 30, 20 y 10 mil lux.



Kit Aquecedor
(Equipo + Unidad de Agua)

Water heating for triple syringe.
Botón del Calefacción en el agua de la jeringa.



Hand Piece Cobra Kit
Kit Piezas de Mano Cobra

Hand Pieces Kit with a unique internal irrigation system.
Kit de Piezas de Mano con exclusivo Sistema de Irrigación Interna.



Space Kit connection box
Kit space caja de conexión

Incorporated into the base of the dental chair.
Incorporado a la base de lo sillón.



Dental Chair
Sillón



Delivery Unit
Modulo Dental



Water Unit
Unidad de Agua



Dental Light
Reflector

IT'S MORE THAN TECHNOLOGY. IT'S GNATUS.
ES MÁS QUE TECNOLOGÍA. ES GNATUS.

