

**OFERTAS
JUNIO / JULIO
2026**



ASVADENT

32
AÑOS
CONTIGO



DENTA EUROPA

Rayos X Portatil

1.490⁰⁰ €



DENTA EUROPA

Equipo dental S200

Equipo dental con mangueras colibrí

7.690⁰⁰ €



DENTA EUROPA

CBCT DentaEuropa 3 en 1

Panoramico, CT y Cefalometrico

29.990⁰⁰ €

EQUIPO DENTAL S500

- ✓ Gran funcionalidad
- ✓ Integración con microscopía
- ✓ Cirugía mínimamente invasiva



Lámpara Led, la temperatura del color y la iluminación se pueden controlar mediante el tacto.
Rango de iluminación 7000-56000lx

Mangueras colgantes y panel de comandos en el brazo

Cojín plegable para las piernas

Brazo Auxiliar con mangueras de aspiración y panel de comandos

El sillón suspendido crea suficiente espacio para las piernas de doctores y asistentes

OFERTA
11.750⁰⁰ €

EQUIPO DENTAL S200



Escupidera de vidrio giratoria



Dispensador de toallitas patentado con dispensador de vasos

Lámpara Led de 7000-56000 lx

Brazo auxiliar con doble articulación

Filtro salival desmontable y limpiable

Reposabrazos giratorio, con posición de salida del paciente

Mangueras colibri

OFERTA
7.690⁰⁰ €

EQUIPO DENTAL S300



- Escupidera
- Respaldo para la cabeza
- Amplio y anatómico tapizado
- Pedal de comando acoplado
- Lámpara Sirius
- Unidad dental con brazo neumático con posibilidad de aumentar al cuarto módulo por 390€
- Botón on/off
- Caja de conexiones integrada

OFERTA
4.990⁰⁰ €

EQUIPO DENTAEUROPA BLACK



- Módulo de Turbina
- Módulo de Micromotor Neumático
- Módulo de Ultrasonidos
- 2 Módulos de Jeringa

Panel del Asistente:

- Jeringa 3 Funciones
 - 2 mangueras de Aspiración
 - Lámpara de Polimerizar
- Lámpara a equipo regulable en intensidad de 7.500 a 90.000 lux
Taburete

OFERTA
5.750⁰⁰ €

EQUIPO CIRUGÍA



OFERTA
6.990⁰⁰ €

Brazo auxiliar Predispuesto para jeringa y turbina

Bandeja doble

Mangueras de aspiración
Fina y gruesa

EQUIPO PARTNER



- Módulo de Turbina de Luz
- Módulo de Micromotor Eléctrico Luz
- Módulo de Jeringa
- Módulo de Ultrasonidos

Micromotor Eléctrico Luz MC3
Lámpara FARO LED
Sillón SWIDENT
Brazo mandos auxiliar
Pedal Multifunción

OFERTA
11.590⁰⁰ €



PANORÁMICO X-VIEW 2D PAN

trident



Gracias a la introducción de la tecnología más reciente y las funciones más novedosas en radiología digital, X-VIEW 2D PAN requiere un tiempo de exposición mínimo para capturar imágenes claras y contrastadas. Las imágenes panorámicas del X-VIEW 2D PAN tienen un enfoque preciso a lo largo de toda la arcada y facilitan la evaluación general de la cantidad y calidad ósea, la dentición, la articulación temporomandibular y el trauma dentomaxilofacial.

Sensor TDI CCD

Área activa 151 x 6,9 mm

Generador pulsado de alta frecuencia

Imágenes en alta definición de 15 x 30 cm con tiempo de exposición de 14.3 s para niños y 15,8 s para adultos

Punto focal de 0.5 mm

OFERTA
12.750⁰⁰ €

ESCÁNER X-VIEW 3D

trident

X-VIEW 3D PAN es una solución optimizada 2 en 1 que ofrece un escaneo rápido, de entre 2,4 y 15,5 segundos, para obtener una amplia gama de imágenes dentales panorámicas en 2D y 3D.

Detector de Rayos X de panel basado en IGZO

Tamaño de píxel **100 μm**

Tamaño mínimo del voxel **50 μm**

FOV único **11x11 cm**

Imágenes 2D PAN de 15x30 cm (adulto)

Imágenes 2D PAN de 13x30 cm (niño)

Imágenes volumétricas

OFERTA
24.990⁰⁰ €



ESCÁNER DE PLACAS DE FOSFORO PSPIX2



PSPIX^{®2} es AUTÓNOMO

PSPIX^{®2} combina una serie de funciones autónomas que garantizan un flujo de trabajo eficiente sin sobrecargarlo con una serie de acciones que debe realizar usted mismo.

PSPIX^{®2} es EFICIENTE

PSPIX^{®2} es un conjunto de tecnologías que garantiza la claridad y el contraste de sus imágenes.

También es uno de los escáneres de placas de fósforo más rápidos, con un proceso de escaneo completo de 12 segundos.

PSPIX^{®2} es ADAPTABLE

Su pequeño tamaño revolucionario requiere tan poco espacio que puede encajar fácilmente en cualquier consulta. Agilice su flujo de trabajo al poder compartirlo con hasta 10 usuarios.

OFERTA
4.850⁰⁰ €

SENSOR INTRAORAL SILVER

I-View Silver utiliza un sistema de calibración de imagen directamente derivado de la tecnología CBCT y panorámica, desarrollada por Trident, que permite obtener el máximo detalle y la máxima resolución en cada toma

Dos tamaños

Moderno diseño en bloques de color

Cuerpo delgado, con sólo 4,4 mm de grosor

Esquinas redondeadas y superficie plana perfectamente lisa

Funda protectora de silicona útil para proteger el sensor

Área activa:

Sensor Tamaño 1: 20 x 30 mm

Sensor Tamaño 2: 26 x 36 mm

OFERTA
1,590⁰⁰ €

ESCÁNER INTRAORAL TRISCAN



Diseño limpio, forma estilizada y tamaño óptimo para mayor SIMPLICIDAD Y CONFORT.

Con sólo 21,6 cm de longitud y 228 gr de peso, la forma de TriScan se adapta ergonómicamente a la mano del operador y a la boca del paciente.

OFERTA
7.990,⁰⁰ €

RAYOS X AC

Punto focal de 0,7 mm

Con un punto focal de 0,7 mm, RiX-70 produce imágenes de excelente calidad incluso en las zonas de la cavidad oral más difíciles de alcanzar.

Configuración automática del tiempo de exposición

Una vez seleccionados los parámetros de exposición, el tiempo de exposición se ajustará automáticamente en un rango entre 0,06 y 2,0 segundos.

OFERTA
1.990⁰⁰ €



RAYOS X PORTÁTIL

70 kV/2mA.

Ajuste automático de tiempo de exposición en display.

Compatible con todos los sistemas de visualización de imágenes.

- Radiovisiografía
- Placas de fosforo

Peso 1,90kgs

Funciona con baterías, lo que permite su uso autónomo en cualquier circunstancia.

Requisitos para registrar en una instalación dental:

- 1) Disponer de soporte de fijación.
- 2) Disponer de cable de al menos 2m de disparador.

Normativa que autoriza su uso en las clínicas y la posibilidad de desplazarlo en diferentes lugares: **Circular 05-23 del CSN.**



OFERTA
1.490⁰⁰ €

SENSOR INTRAORAL + CÁMARA INTRAORAL



Placa de fibra óptica

El FOP incorporado puede tomar imágenes de alta definición más realistas e incluso se pueden encontrar fácilmente dientes agrietados.

Amplio rango de Exposición

Tamaño de sensor 1,3 – ancho de disparo 22,5mm

Tamaño de sensor 2 – ancho de disparo 227mm

Amplio rango dinámico

Fácil grabado de dosis bajas y altas, lo que reduce en gran medida la experiencia de grabación. La claridad y la sensibilidad de la imagen mejoran significativamente.

Resolución
1,92M (1600*1200)

Dimensión
39x27,5mm

Área activa
30x22,5mm



Centelleador
Gos

Placa de Fibra Óptica
FOB

Tipo de Chip
CMOS APS

Sistema Operativo
Windows 7/10
(32bit&64bit)
MacOS

Resolución
Parámetro real

Otras
TWAIN



Píxeles
2,76M (1920*1440)

Dimensión
45x32,5mm

Área activa
36x27mm



Sensor de imagen 1/4"1.22Mega pixel CMOS
Resolución 640x480 (480P)
Ángulo de visión ≥ 60°
Distorsión <5%
Luminosidad 6 LEDS
Campo de enfoque 5mm~ 35mm



OFERTA
1.390⁰⁰ €

PANORÁMICO 3D A9



vatech

FOV Integral para imagen 3D

Las imágenes 3D permiten realizar diagnósticos precisos para planificar los tratamientos dentales. Incluye la áreas maxilar y mandibular en una sola exposición. Ideal para cirugías de implantes y diagnósticos en cirugía oral.



Consultar precio



PANORÁMICO 3D A9 CON TELE

Tecnología Lite en nuestro sistema de Rayos X 3 en 1

A9 cuenta con una tecnología lite que además de la función PANO + CEPH te permite obtener imágenes CT de manera lite para tu diagnóstico. Proporciona las imágenes más precisas y de mayor calidad.

Consultar precio



vatech

PANORÁMICO DENTAEUROPA CBCT 3 EN 1



DENTA EUROPA
www.denta.europa.com

Gratis

Actualización del software

OFERTA
29.990⁰⁰ €



3 en 1: Panorámico, CT y Cefalométrico

Colocación del paciente: De pie, sentado, accesible en silla de ruedas

Punto Focal: 0,5mm

Puede ver 16 imágenes panorámicas CT en la pantalla simultáneamente

El software de procesamiento **OnDemand3D**

ESCÁNER INTRAORAL



vatech

Consultar
precio

Calidad de imagen superior
Diseño ligero y compacto
59 segundos de escaneo
Rotación 360º
Profundidad de escaneo 20mm
Puntas esterilizables en autoclave 250 veces
165g más pequeño y ligero

SENSOR INTRAORAL + PC

EzSensor Classic proporciona constantemente imágenes de alta resolución y claras para un diagnóstico preciso y la planificación del tratamiento.

Detector: **CMOS**

Tamaño de Pixel: **29,6µm**

Resolución teórica: **17lp/mm**

Gama Dinámica: 12 bit

Área Activa (Ancho x Largo): Tamaño 1.0: **20x30 mm** / Tamaño 1.5: **24x33 mm** / Tamaño 2.0: **26x36mm**

Dimensiones (Ancho x Largo): Tamaño 1.0: **25,4x36,8 mm** / Tamaño 1.5: **29,2x39,5 mm** / Tamaño 2.0:

31,3x42,9 mm

Esesor: **4,8 mm**

Longitud del cable: **2,7 m**

vatech



Consultar
precio



SENSOR INTRAORAL TIMEX



Especificaciones del sensor

Tipo de sensor CMOS

Resolución 25,00 pares de líneas por mm

Tamaño 1: 20 x 30 mm (área activa)

Conexión USB 2.0

Monitor 1024x768

Cable de 3 metros

OFERTA

1.790⁰⁰ €



LÁMPARA CIRUGÍA RODANTE



OFERTA
1.990⁰⁰ €

DENTAEUROPA SERIES

La tecnología LED ha revolucionado el arte del diseño de equipos para el sector médico.

DentaEuropa lleva esta tecnología innovadora al área de procedimientos y exámenes. Con su avanzado sistema de gestión térmica, controles de atenuación integrados, salida de luz brillante y carcasa compacta, DentaEuropa cumple con los estrictos requisitos tanto de los diseñadores como de los profesionales de hospitales.

Iluminación uniforme para el área de trabajo
Luz de alta intensidad
120.000 lux/ 1 metro.



Sin reflejos

Reproducción cromática incomparable
Índice de reproducción cromática (CRI) > 96

Para combatir la fatiga ocular

Fácil de limpiar

El mango extraíble se puede esterilizar y la construcción cerrada del accesorio permite una fácil limpieza.

CARRO PARA ESCÁNER INTRAORAL



- Carro modular adaptable
- Medidas generales: 63 x 56 x 87 cm
- Medidas del cajón: 35 x 25 x 10 cm
- Diseño funcional:
 - Rotación horizontal 90°
 - Ajuste izquierda/derecha 90°
 - Inclinación regulable
- Soporte de carga: hasta 10 kg
- Cajón con cierre de seguridad, compatible con ordenadores de mesa y portátiles

OFERTA
590⁰⁰ €

CARRO PARA ESCÁNER INTRAORAL



Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.

- 3 bandejas de 290 x 396 mm.
- 3 tomas de corriente para alimentar los equipos.
- 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- Peso soportado por bandeja, 5 kg.

OFERTA
199⁰⁰ €

MOTOR DE ENDO DENTAEUROPA

El motor mecanizado posee 10 ajustes de memoria para guardar en el dispositivo.

Incorpora localizador de ápice con una pantalla OLED.

La tecnología Bluetooth permite sincronizar el motor con el localizador de ápice

Reducción del contra ángulo de 16:1.

Conector USB.

Dispone de control de torque.

Batería recargable y reemplazable.

Disponible para 6 ángulos.

Autoclavable a alta temperatura.

Con sensor automático. El motor comienza a trabajar cuando entra en contacto con el diente y se detiene automáticamente cuando es separado de la pieza dental



OFERTA
796⁰⁰

LOCALIZADOR DE ÁPICES TÁCTIL APEX

Pantalla LCD de gran calidad.

Panel táctil.

La tecnología Bluetooth permite sincronizar el localizador al **motor de endodoncia iRoot Pro.**

Puede ser utilizado también con el Endo Motor Marc III a través de cable.

Incluye **precisión giroscópica** por lo que la pantalla se adapta a diferentes posiciones.

Tecnología multifrecuencia.

Ajuste multiángulo.

Alerta cuando la lima endo esté a menos de 2.2 mm del ápice.




OFERTA
299⁰⁰ €

MUEBLE ESTERILIZACIÓN



Medidas: Ancho: 164cm Alto: 197cm Profundo: 60cm
Material: Metálico

OFERTA
2.750⁰⁰ €

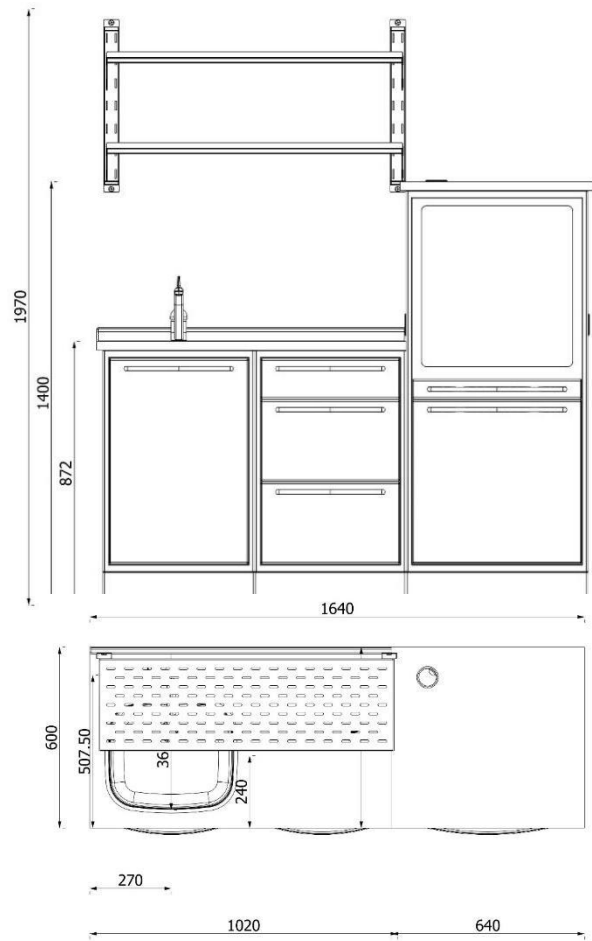

MUEBLE DISPENSADOR ASTRA



Dimensiones
 50 x 44 x 16,5 cm

OFERTA
575⁰⁰ €

MUEBLE DISPENSADOR



Dimensiones
 126 x 50 x 30 cm

OFERTA
690⁰⁰ €

AUTOCLAVE 18L CLASE B

FILTRO DE AIRE

Filtra las impurezas transportadas por el aire en la cámara para evitar la contaminación

NUEVA CÁMARA DE ESTRUCTURA DE SEIS CAPAS, CREACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA DE CÁMARA

La cámara adopta una estructura de seis capas, utilizando la especial Técnica de espumación de microporos



TANQUE ABIERTO DE GRAN CAPACIDAD

Tanque abierto, fácil de limpiar. El sensor de calidad del agua incorporado monitorea la calidad del agua, reduce la tasa de fallas de la máquina y prolonga la vida útil de la máquina.

ADECUADO PARA DIFERENTES TIPOS DE INSTRUMENTOS

Instrumentos quirúrgicos, instrumentos dentales, cristalería, unidades de inyección y otros objetos resistentes a la compresión y al vapor caliente

SISTEMA DE DOBLE BLOQUEO - CERRADURA MECÁNICA CON SISTEMA AIR LOCK

El sistema de doble bloqueo hace que el autoclave sea más seguro y evita posibles riesgos de seguridad

OFERTA
2.190⁰⁰ €

AUTOCLAVE SOLE 22L CLASE B

trident

Está equipado con un **sistema de autodiagnóstico** para monitorear el funcionamiento de los componentes principales.

Sole **extrae el 98% del aire** de la cámara, mediante tres procesos de vacío fraccionado a -0,80 Bar; este proceso garantiza una buena atmósfera para una perfecta generación de vapor saturado seco.

Está equipado con un **generador de vapor instantáneo** que permite ciclos más rápidos con resultados óptimos en el consumo de agua/tasa de carga de esterilización.

Información y seguridad operativa: Sole crea una contraseña de ingreso para cada usuario.

Sistema de **bloqueo de seguridad:** la puerta se bloquea automáticamente una vez que comienza el ciclo.



OFERTA
2990⁰⁰ €

El **D7** es un ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa diseñado para la realización de tratamientos de profilaxis dental, periodoncia y endodoncia.

Funciones: con sus **tres programas Profilaxis (G), Periodoncia (P) y Endodoncia (E)**, fácilmente programable gracias a su cómodo display que permite su uso incluso con guantes mojados, y una frecuencia de trabajo regulable entre 25.000 y 31.000 Hz.

La retroalimentación automática y la potencia de salida constante dotan al dispositivo de una eficacia excepcional.

El D7 dispone de **suministro autónomo** lo que **permite la utilización de soluciones clínicas** como: Peróxido de Hidrógeno, Hipoclorito o Clorixidina, las cuales mejoran drásticamente el efecto del tratamiento periodontal y la irrigación endodóntica.

Su pieza de mano es desmontable para su esterilización en autoclave y totalmente **compatible con puntas con rosca tipo S**.

ULTRASONIDOS DTE D7 SIN LUZ



- **Conexión manguera:** Tipo S sin luz.
- **Sistema rosca punta:** Tipo S.
- **Frecuencia de trabajo:** 25.000 – 31.000 Hz.
- **Amplitud de movimiento:** 100µm.
- **Programas de trabajo:** G- Limpieza; P- Periodoncia; E- Endodoncia.
- **Suministro de agua:** Autónomo

OFERTA
459⁰⁰ €

ULTRASONIDOS DTE D7 CON LUZ

- **Conexión manguera:** Tipo S con luz.
- **Sistema rosca punta:** Tipo S.
- **Frecuencia de trabajo:** 25.000 – 31.000 Hz.
- **Amplitud de movimiento:** 100µm.
- **Programas de trabajo:** G- Limpieza; P- Periodoncia; E- Endodoncia.
- **Suministro de agua:** Autónomo

OFERTA
498⁰⁰ €



LÁMPARA B75 FARO



La lámpara B75 está equipada con **dos puntos de luz LED independientes**: uno circular para cirugía, con una intensidad de iluminación superior a 110.000 LUX, y uno elíptico, para uso odontológico que viene con una proyección exclusiva de luz reflejada capaz de asegurar la máxima luminosidad. Calidad, rendimiento y confort visual.



OFERTA
4.790⁰⁰ €
OFERTA CON CÁMARA
6.690⁰⁰ €



CARRO DENTAL




El Carro Dental es una solución práctica y elegante para la organización y almacenamiento de instrumental y materiales clínicos en consultorios dentales y médicos.

Diseñado para maximizar el espacio de trabajo, ofrece una estructura robusta con cinco cajones espaciosos, facilitando un acceso rápido y ordenado a todo lo necesario durante los procedimientos.

Su acabado en material resistente y fácil de limpiar garantiza una higiene óptima en el entorno clínico.

Medida total (con ruedas): **50cm x 56cm x 82 cm**

Cajones 1-5: **40cm ancho x 37cm largo**

Cajón 6: **32cm ancho x 43cm largo**

Peso: **67Kg**



OFERTA
899⁰⁰ €

MICROSCOPIO DENTAEUROPA NEW TME



Microscopio quirúrgico

Aumentos: **Zoom manual**

Oculares: **12,5X/18B** (Apertura: 18 mm)

Binoculares: **0~210° inclinables**

Lente objetivo: **f = 250 mm** (enfoco de 0 a 16 mm)

Iluminación: **LED**

Sistema de soporte: de **sobremesa, montaje con clip de mesa, montaje en unidad dental**

OFERTA

6990⁰⁰ €

MICROSCOPIO DENTAEUROPA 3000D PRO

0-210° Tubo binocular ergonómico

Ajuste de distancia de pupila incorporado

Sistema 4k incorporado

Sistema de aumento



Diseño, fabricación y promoción de microscopios quirúrgicos con sistema de imágenes HD en odontología.

Ya sea que se dedique a la endodoncia, la periodoncia o la odontología quirúrgica, ofrecemos soluciones de microscopio ideales para su práctica.

OFERTA

13.990⁰⁰ €

180-460mm lente de objetivo de enfoque vario

MICROSCOPIO DENTAEUROPA G4-D

Oculares: **10X/22B**

Rango de dioptrías: **+/-7D**

Filtro: **Naranja, verde** Tasa de aumentos: **Zoom**

Ampliaciones: **3,6x-23,3x**

Objetivo: **WD180mm-460mm**

Diámetro del CDV: **65mm**

Mecanismo del brazo de contrapeso: **Sí** (ajuste del par del muelle helicoidal)

Brazo transversal: **Eslora: 570mm / Ángel giratorio: 360°**

Brazo oscilante: **Eslora: 850mm / Ángulo de**

rotación: ±100° / Movimiento vertical: ±300mm

Mayor alcance del brazo: **1760mm**

Tamaño de base: **580mm x 580mm**

Base con frenos: **Sí**

OFERTA

13.590⁰⁰ €

MICROSCOPIO G4 PRO

OFERTA

18.990⁰⁰ €

MICROSCOPIO DENTAEUROPA 3D



Tecnología 3D a simple vista: sistema de seguimiento y localización del ojo humano, impacto estéreo, experiencia visual.

Sin oculares, fácil de operar.

Súper profundidad de campo, zoom de nuevo: 4 veces la profundidad de campo y ampliación tradicionales

Sistema operativo de **doble pantalla** y visualización y módulos de comunicación médico-paciente

Terapia adyuvante con sistema de espejo invertido

Compatible con múltiples pantallas

OFERTA

36.990⁰⁰ €

ASSISTINA 301 PLUS



La lubricación rotativa automática garantiza la mejor distribución del aceite formando una película lubricante homogénea. Disuelve y elimina las partículas de suciedad, prolongando notablemente la vida útil de los instrumentos, al mismo tiempo que se reducen los costes de mantenimiento.



OFERTA
790⁰⁰ €

- 01 Acople el instrumento. Cierre la cúpula.
02 Presione el botón. El programa de mantenimiento se realiza automáticamente.
03 Extraiga el instrumento seco y en perfectas condiciones de mantenimiento transcurridos 35 segundos.

MULTIDEM C27 TRATAMIENTO DEL AGUA

Aproveche ahora las numerosas ventajas que le ofrece la instalación de su nuevo sistema de depuración de agua **Multidem C27**.

Multidem ofrece un agua desmineralizada de gran calidad para la generación de vapor en las autoclaves. Con ello se garantiza un rendimiento óptimo y homogéneo y la prolongación de la vida útil de su esterilizador o equipo de depuración. Además, el dispositivo está equipado con una pistola de pulverización especialmente idónea para la limpieza del instrumental antes de la esterilización.



OFERTA
295⁰⁰ €

VIBRADOR DE CÁPSULAS



OFERTA
169⁰⁰ €

El **vibrador de cápsulas** está diseñado para mezclar cápsulas de amalgama, cuenta con una pantalla LCD que permite ajustar la velocidad y el tiempo de vibración, cuenta con una horquilla metálica adaptada a todo tipo de cápsulas del mercado.

La velocidad máxima para este tipo de amalgama es de 2800-2500 rpm El rango de tiempo es de 1 a 99 segundos.

Silencioso, con una potencia de 40w y emisiones de ruido inferiores a 65db Peso 2 kg
Medidas 26 x 22 x 19 cm.

LASER DENTAEUROPA



**Consultar
precio**

- Tecnología Nd:YAG en nanosegundos, 25mil Watio cada 3ns
- Mínimo efecto térmico (3 Grados)
 - Unica Longitud de onda de 1064nm para descontaminación Profunda y selectiva
 - Alta eficacia sin daño tisular ni superficies implantarías
 - Aplicaciones: ideal para periodoncia, periimplantitis, endodoncia y cirugía
 - Bioestimacion hasta 10mm de profundidad.
 - Unico laser que quita la sensibilidad definitivamente.
 - No hay nada parecido en el Mercado.

TURBINA CON LUZ
AUTOGENERADA



OFERTA
245⁰⁰ €

TURBINA CON ACOPLAMIENTO
LUZ TIPO KAVO



OFERTA
445⁰⁰ €

CONTRAANGULO 1:1 LUZ



LIQUIDACIÓN
339⁰⁰ €

MICROMOTOR NEUMÁTICO LUZ



LIQUIDACIÓN
398⁰⁰ €

KIT ROTATORIOS SIN LUZ



COMPOSICIÓN:
1 Contraangulo 1:1 Led
1 Pieza Recta 1:1
1 Micromotor Irrigacion interna
1 Turbina LUZ

OFERTA
750⁰⁰ €



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

Asvadent SL

Padre Aller, 26
33012 - OVIEDO
www.asvadent.com
Telf. 985 27 73 43

Dr. Moreno, 12
47008 - VALLADOLID
asvadent@asvadent.com
Telf. 983 27 45 84

Núñez Morgado, 5
28036 - MADRID
administracion@asvadent.com
Telf. 902 99 65 38



OFERTA VÁLIDA HASTA el 31 de julio de 2026 (o finalizar existencias). Los precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico y hasta fin de existencias. Las imágenes podrán diferir del producto real.